

# DENTO-PREP™ DUST-CABINET 12V

## BRUKSANVISNING

REF 1905 | SV

### Avsedd användning:


DUST-CABINET är tänkt att användas för pulverblästring med DENTO-PREP™.

### Förberedelser:

Anslut strömkabeln och DUST-CABINET är redo att användas. Skyddsönstret på DUST-CABINET kan demonteras genom att trycka/dra den uppåt.

### Säkerhetsåtgärder:

- ⚠ Använd endast medföljande strömkabel.
- ⚠ Stäng av strömmen från DUST-CABINET vid rengöring och filterbyte.
- ⚠ Använd handskar när du använder DUST-CABINET.

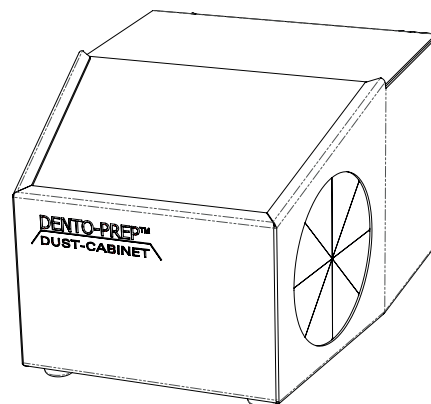


### Underhåll:

Regelbunden rengöring av DUST-CABINET rekommenderas. Ta bort fönstret och sug upp det använda pulvret med dammsugare.

### Filter byte:

DUST-CABINET är försett med ett dammfilter som skyddar det inbyggda elektroniska sugsystemet mot pulvret. Kontrollera filtret regelbundet. Om filtret är skadat eller slitet byt ut det genom att följa steg 1-4.

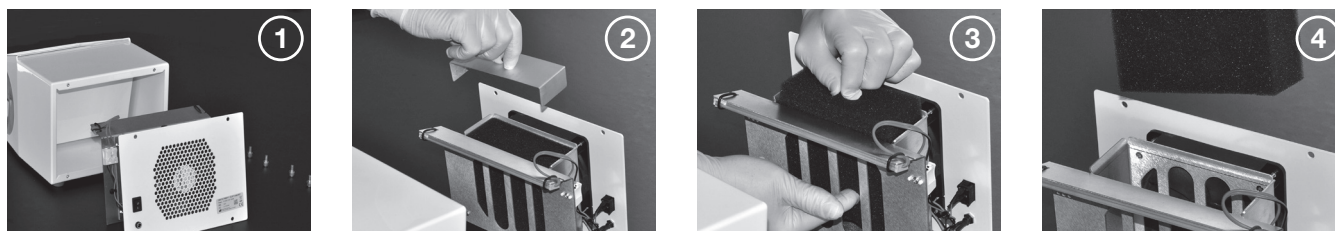

### Teknisk information:

Dimensioner: H 180 B 222 D 298  
Wikt: 3776 gram  
Anslutning: 12 VDC / 1A  
Lampa: LED HF210034, 12 VDC, 3,9W, 4000 K, 900 lumen  
Material, kabinet: Pulverlackerad plåt  
Fönster: Plexiglas

### Avfallshantering:

Kassera DUST-CABINET om enheten är skadad eller har synliga tecken på slitage. Efter sista användningen, placera DUST-CABINET i en uppsamling avsedd för elektroniskt avfall enligt WEEE-direktivet 2012/19/EU.

Garanti: 2 år



**RØNVIG Dental Mfg. A/S**

Gl. Vejlevej 59 • DK-8721 Daugaard • Danmark

Tel.: +45 70 23 34 11 • Fax: +45 76 74 07 98 • E-mail: export@ronvig.com • www.ronvig.com

