


Halvbricka (1 st)

PractiPal halvbricka med plats för 9 instrument.
Brickan gjord av autoklaverbar plast.
Organiserad och säker förvaring av instrument.

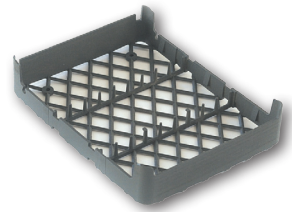

Helbricka (2 st)

PractiPal helbricka plats för 9-18 instrument.
Två halvbrickor sammanfogade med clips.
Organiserad och säker förvaring av instrument.



Bygel

Låser fast instrumenten som förblir säkrade och oskadda vilket är mycket viktigt i diskdesinfektorer som har högt spoltryck. Finns i 9 färger för färgkodning av uppdukningar.



Stort Borrställ eller Filställ

Plats för 28 filar eller 16 borrhållare.
Lätt att sätta tillbaka filar och borrhållare.
Säker hantering - minimal risk för skada i säkrat läge. Finns i 9 färger för enkel färgkodning. Passar i hel- och halvbricka.



Litet Borrställ eller Filställ

Plats för 13 filar eller 2 st förlängda borrhållare samt 5 st HP/RA samt 8 st FG. Passar befintliga PractiPalBrickor. Kan även användas separat. Finns i 9 färger för enkel färgkodning. Passar i hel- och halvbricka.



MultiBlock

I denna placeras engångsartiklarna som:
- MultiDappen för vätskor / LjusSkydd
- MultiPoint behållare
- Avfallskopp
- Avskrapningskuddar
Finns i 9 färger för enkel färgkodning. Passar i hel- och halvbricka.



MultiDappen behållare

Placeras på MultiBlock.
Kan även användas fristående.
Försedd med fördjupningar av olika volymer för bonding, primer, etsmedel m.fl.
Detta är en engångsartikel.



MultiPoint behållare

Placeras på MultiBlock.
Kan även användas fristående.
Förvaring av PaperPoints och GuttaperchaPoints samt vätska.
Detta är en engångsartikel.



Avfallskopp

Placeras i MultiBlock.
Kan även användas fristående.
Praktisk behållare för avfall med avskrapningsmöjligheter.
Kan även användas till vätskor.
Detta är en engångsartikel.



LjusSkydd

Placeras på MultiDappen behållaren.
Skyddar ljushärdande material.



Avskrapningskuddar

Kuddar av skumplast som placeras i MultiBlock.
För avskrapning av instrument och praktisk plats för filar som då rensas från debris.
Detta är en engångsartikel.



BrickStäll

Praktiskt brickställ.
För enkel hantering av brickor i diskdesinfektor.
Rymmer 8 PractiPal Helbrickor eller 8 PractiPal Halvbrickor. Brickorna lutas mot spolningen för att uppnå optimal renhet.



PractiPal bricksystem består av brickor, borrställ, filställ, engångsartiklar och tillbehör som alla går att fästa på brickan så att de sitter kvar under hela rengöringsprocessen.

Kombinationerna är många och ger varje klinik möjligheter att öka effektiviteten genom genomtänkta och alltid färdiga uppsättningar av brickor för varje behandlingsåtgärd.

PractiPal ger personalen helt nya verktyg för att utveckla hygien och infektionskontroll som blir allt viktigare med ständigt ökande krav.

Kraven inom just dessa områden har fått större fokus i många länder där kraven har skärpts dramatiskt och regelbunda kontroller genomförs och som t.o.m. inneburit stängda kliniker.

Att arbeta med PractiPal systemet ger ett starkt ökat medvetande och nya kunskaper om hygien i praktiken.

Steril betyder inte ren och säker!

Tron på att sterila instrument är rena och säkra är vanligt förekommande.

Orena instrument innehåller mikrobiologiska rester som, trots sterilisering, kan skapa omfattande inflammatoriska reaktioner.

Rena instrument är därför den självklara förutsättningen för ett patientsäkert arbete.

PractiPal brickan har en överlägsen konstruktion för fixering av instrument i öppen bricka som i en diskdesinfektor ger absolut åtkomlighet igenom hela reningsprocessen.

För att ytterligare förstärka graden av renhet är PractiPal tillverkat av en glasfiberförstärkt mycket tålig plast som ej absorberar värme utan all värmeenergi i en diskdesinfektor och ångautoklav används till instrumentens rening.

PractiPal är genomtänkt in i minsta detalj för en ren och säker hantering av instrument.

Färger

	Glasfiberförstärkt PPS	Bricka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Polyamid	Bygel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Glasfiberförstärkt Polyamid	Bygel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Polyamid	Borr/Filställ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Polyamid	Multi Block	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Polypropen - PP	Multi Dappen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Polypropen - PP	Multi Point	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Polypropen - PP	Avfallskopp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Polypropen - PP	Avskrapningskuddar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Diskdesinfektor
 Ångautoklav
 Engångsprodukt

Alla komponenter är gjorda av hållbar plast som inte korroderar eller skäl värme under reningsprocessen

PractiPal® is a registered trademark owned by Directa AB

DIRECTA AB P.O. Box 723, SE-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Tel: +46 8 506 505 75, Fax: +46 8 590 306 30, info@directadental.com, www.directadental.com

Ren effektivitet

PRACTIPAL® TRAYS



PRACTIPAL®

PRACTIPAL® Complete Set

Helbricka, svart (2 st)
Bygel (1 st)
MultiBlock (1 st)
MultiPoint behållare (1 st)
Stort Borr/Filställ (1 st)
Engångsartiklar:
-MultiDappen (5 st)
-MultiPoint (5 st)
-Avfallskopp (5 st)



Endodonti
Helbricka
Filställ för 28 filar
Plats för 9 instrument
MultiBlock



PRACTIPAL® Compact Set

Halvbricka, svart (1 st)
Bygel (1 st)
Avfallskopp (4 st)
Borr/Filställ (1 st)



Lagning eller Preparation
Helbricka
2 långa, 6 RA borr 8 FG
Plats för 9 instrument
MultiBlock



PRACTIPAL®



Endodonti
Halvbricka
Compact filställ för 13 filar
Plats för 5 instrument



Hygienist
Halvbricka
Plats för 9 instrument



Lagning eller Preparation
Halvbricka
Compact borrställ för 2 långa, 6 RA borr 8 FG
Plats för 5 instrument



Reservborrställ
Halvbricka
Plats för 6 Compact borrställ

