

Tillvägagångssätt

Applicering



Literature:

- 1 Boeckler, A., Setz, J. M.; Die Oberflächenqualität provisorischer Kunststoffkronen nach Bearbeitung mit verschiedenen rotierenden Instrumenten; Quintessenz 55 177 (2004)
- 2 Gausmann, M., Keller, P. Wöstmann, B., Fergler, P.; Bruchfestigkeit und Reparaturfähigkeit chemisch unterschiedlicher temporärer Kronen- und Brückenmaterialien; ZWR, 108, 720 (1999)
- 3 Kaup, M., Ramb, H.-J., Dammaschke, T., Ott, K.; Temperaturentwicklung im Pulpakavum bei der Herstellung von provisorischen Versorgungen; Dtsch Zahnärztl. Z 55 (3), 180 (2000)
- 4 Lang, R., Rosentritt, M., Handel, G.; Die provisorische Versorgung – Aufgaben, Materialkunde und Herstellung; Quintessenz 53, 27 (2002)

- 5 Welker, D., Rzanny, A., Göbel, R.; Interimsversorgung bei Kronen- und Brückenersatz – Indikation, Werkstoffe, biologische Aspekte, Methodik; Quintessenz Zahnmedizin 25 (10), 1133 (1999)
- 6 Welker, D., Rzanny, A., Hecht, R., Göbel, R., Facht, M., Nestler, S., Hoheisel, U., Hinz, M., Küpper, H., Windmüller, B.; Weiterentwicklungen bei Kunststoffen für Interimsersatz; ZMK 17 298 (2001)
- 7 Welker, D., Rzanny, A., Göbel, R.; Bericht an VOCCO, 2004

Dina val

StructurPremium



Produkter

- Art.nr 1710 Intro Set 75 gr patron A3, Dispenser typ 2, blandningsspetsar typ 6
 Art.nr 1712 75 gr patron A1, blandningsspetsar typ 6
 Art.nr 1713 75 gr patron A2, blandningsspetsar typ 6
 Art.nr 1714 75 gr patron A3, blandningsspetsar typ 6
 Art.nr 1717 75 gr patron A3.5, blandningsspetsar typ 6
 Art.nr 1718 75 gr patron B1, blandningsspetsar typ 6
 Art.nr 1715 75 gr patron B3, blandningsspetsar typ 6
 Art.nr 1716 75 gr patron BL, blandningsspetsar typ 6
 Art.nr 1719 Storpack 5 x 75 gr patron A3, blandningsspetsar typ 6

StructurPremium QM



Produkt Structur Premium QM I (Incisal)

- Art.nr 1726 QuickMix spruta 8 gr, blandningsspetsar typ 10

Provicol QM / Provicol C



Indikationer

Provicol är ett eugenolfritt, temporärt cement som även innehåller Kalcium-Hydroxid, för temporär cementering av inlays, onlays, kronor, delkronor, broar, fästen, stift samt för temporär fyllning av mindre kaviteter.

Fördelar

- Eugenolfri
- Kalcium-Hydroxid
 - Bakteriehämmande effekt
 - Skyddar pulpa
- Semi-elastisk konsistens för säker vidhäftning
- Ideliskt före cementering med resincement
- Tillgänglig i 2 versioner
 - Provicol QM i en praktisk QuickMix spruta
 - Provicol C i patron
- Snabb och direkt applicering utan blandning
- Bubbelfri och perfekt blandning

Produkter

Provicol QM

- Art.nr 1074 5 ml QuickMix spruta, blandningsspetsar typ 10
 Art.nr 2189 50 st blandningsspetsar typ 10

Provicol C

- Art.nr 1076 2 x 65 gr patron, blandningsspetsar typ 6
 Art.nr 2185 50 st blandningsspetsar typ 6

Tillgängligt från:

VOCO

P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Germany · Tel. +49 (4721) 719 - 0 · Fax +49 (4721) 719 - 140 · www.voco.com

creative in research

Estetiskt. Bestående. Perfekt.

StructurPremium

Överlägset provisorium
för de högsta krav

VOCO

creative in research



Estetiskt. Bestående. Perfekt.

StructurPremium

Temporär rekonstruktion

En professionellt förberedd tandpelare är nödvändigt för en perfekt övergång till den permanenta protetiken.

En temporär rekonstruktion måste därför:

- Vara kompatibel med pulpa
- Ge ett fullgott skydd det skadade dentinet
- Bibehålla originaltandens position samt
- Vara snabb och enkel att använda

Möter såväl patientens som tandläkarens krav

Ett temporärt kron.- och bromaterial måste uppfylla kraven från både patienten som tandläkarens. Patienten vill ha ett provisorium som är såväl prisvärt samt ser ut och fungerar precis som den naturliga tanden. Förutom detta skall det sitta säkert på plats till den permanenta kron.- eller bromaterialet kommer på plats.

Till patientens krav, vill även tandläkaren ha ett ekonomiskt material som är snabbt och enkelt att hantera, tillverka och polera. Materialet måste även motstå frakturer.

“Ingen optisk skillnad kan ses in vivo mellan porslin till metall förenade kronorna 12 och 22 samt de temporära 11, 12 och 22.” Dr. Ulrich Sachse, Kiel, 2004

Preparation teeth 11, 21 and 23



Details on temporaries 11, 21, 23



Total view temporaries 11, 21, 23



Pictures: Dr. Ulrich Sachse, Kiel, 2004

StructurPremium möter såväl patientens som tandläkarens förväntningar. Vad gäller såväl estetik som egenskaper.

StructurPremium – konkret

StructurPremium skapades för att komplettera den redan beprövade Structur serien från VOCO. Med sitt naturligt emaljliknande hårdhet och fluorescerande egenskaper. Möter StructurPremium även de högst ställda förväntningarna.

Citat från tandläkare om StructurPremium:

- “Lika estetiskt som det högst moderna kompositmaterialet”
- “Lika hårt som emalj”
- “Även en polerborste ger en gnistrande glans”

Källa: VOCO marknadsundersökning 2003/2004




Fakta

Indikationer


- Kronor
- Broar (inkl. flerledsbroar)
- Onlays
- Inlays

Fysiska egenskaper


De fysiska egenskaperna för StructurPremium ligger nära egenskaperna för det permanenta materialet och tillåter tillverkning av långvariga provisorier.

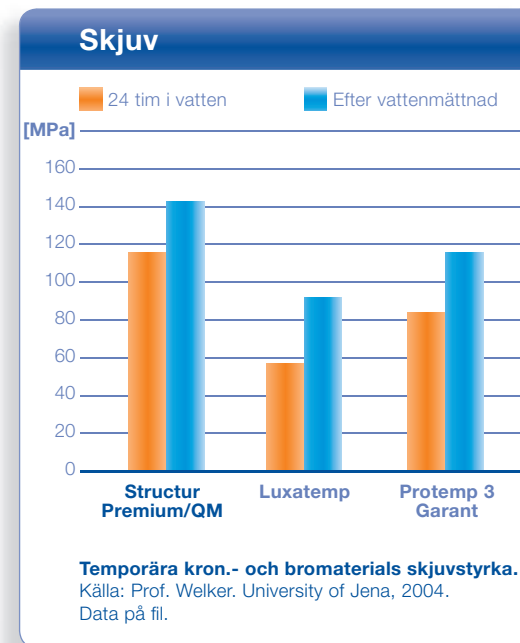

Skjuvstyrkan för StructurPremium/QM är jämförbar med den hos kompositen.

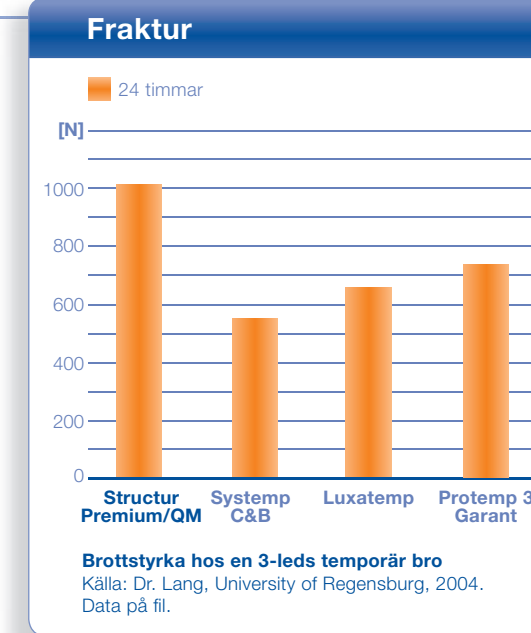


Brottstyrkan hos StructurPremium/QM, överskrider klart värdet för mänsklig tuggstyrka samt värdet hos konkurrerande material..

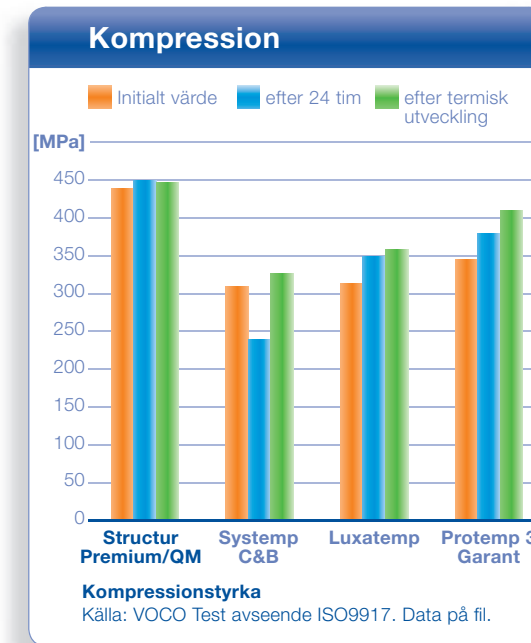

StructurPremium/QM har en hårdhet som liknar emalj, vilket är ca 400MPa.



Snabbt och Effektivt

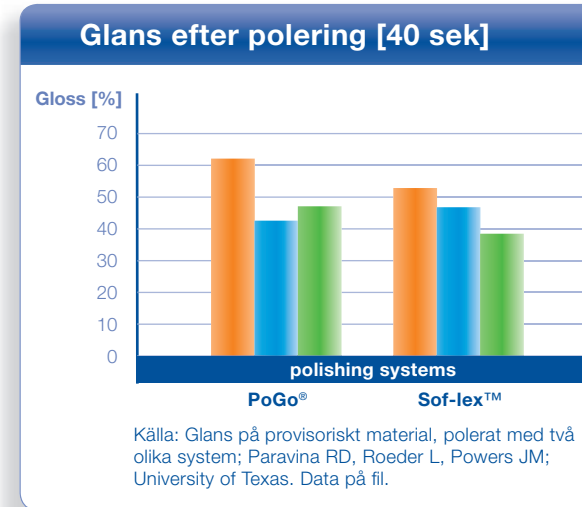

Structur Premium/QM Protemp 3 Garant Luxatemp

Fördelar

- **Estetiskt som porslin**
Hög färgstabilitet, Naturlig lyster (fluorescerande), strålande glans, Tillgängligt i 8 färger. (A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, BL samt I (Incisal))
- **Hårt som emalj**
Extremt högt motstånd mot frakturer, kompressionsstyrka samt transversal styrka
- **Perfekt handhavande**
Bekväm hantering, lätt att finjustera och polera



Protemp™ 3 Garant™, Luxatemp®, System® C&B, PoGo® och Sof-lex™ är inte registrerade varumärken av VOCO