



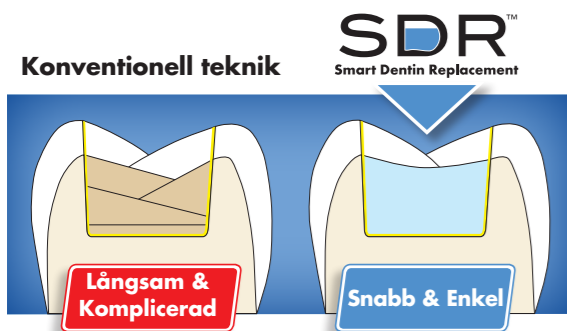

Stress-fri fyllning med SDR™

Använd Palodent® Plus tillsammans med SDR™!
Snabbt och enkelt uppnås en tät marginal anslutning, precisa kontaktpunkter och en hållbar fyllning!

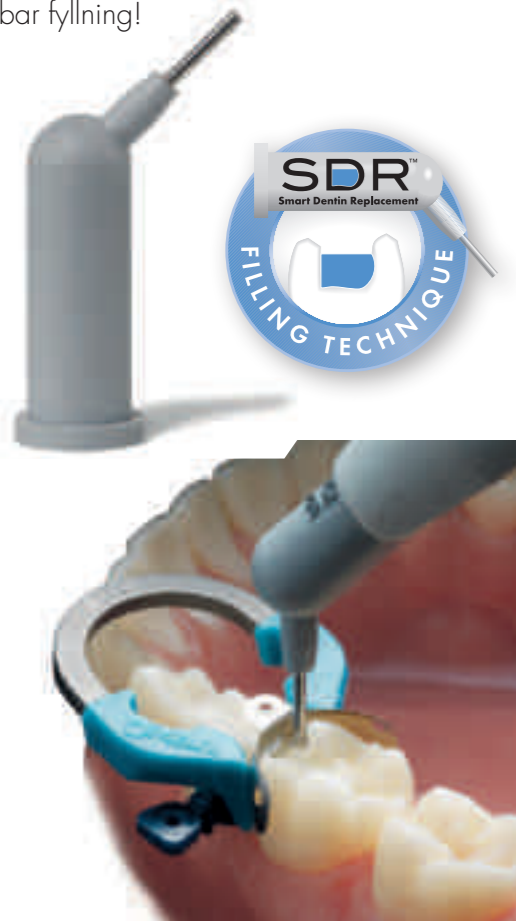

- 4 mm härdningsdjup – färre lager, enkelt och snabbt
- Utmärkta flytegenskaper, adapterar tätt till kaviteten
- Kompatibelt med din nuvarande adhesiv*

*Kan användas med metakrylatbaserade adhesiver och kompositer.

Beställningsinformation

659700 Introductory Kit
100 matriser – 25 av vardera storlek: 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm
75 kilar – 25 av vardera storlek: Small, Medium, Large
30 WedgeGuards – 10 av vardera storlek: Small, Medium, Large
1 universal ring, 1 smal ring, 1 tång, 1 pincett



625.00.001 Starter Kit
20 matriser: 15 x 5,5 mm, 5 x 4,5 mm
15 kilar – 5 av vardera storlek: Small, Medium, Large
5 WedgeGuards Medium
2 universal ringar, 1 tång, 1 pincett
SDR, 4 kapslar à 0,25 g



Matriser, refill

- 659710 Storlek 3,5 mm (50 st)
- 659720 Storlek 4,5 mm (50 st)
- 659730 Storlek 5,5 mm (50 st)
- 659740 Storlek 5,5 mm (100 st)
- 659750 Storlek 6,5 mm (50 st)



Ringar, refill

- 659760 Universal (2 st)
- 659770 Smal (2 st)



Kilar, refill

- 659780 Small (100 st)
- 659790 Medium (100 st)
- 659800 Large (100 st)



WedgeGuard, refill

- 659830 Small (50 st)
- 659840 Medium (50 st)
- 659850 Large (50 st)



659810 **Tång, refill (1 st)**



659820 **Pincett, refill (1 st)**

DENTSPLY Nordic Baltic
Box 2024, SE-128 21 Skarpnäck
Tel +46 (0)8 685 65 05
Fax +46 (0)8 447 60 55
www.dentsply.eu

606.03.002 **SDR™ Refill**
15 kapslar (à 0,25 g),
universal färg



606.03.003 **SDR™ Eco Refill**
50 kapslar (à 0,25 g),
universal färg
1 förvaringsbox i metall



TYPBR & Original/EO Grafiska 1112

OPTIMALA KONTAKTPUNKTER



Sektionsmatrissystem för klass II-fyllningar

- ✓ Täta kontakter
- ✓ Mindre överskott, mindre putsning
- ✓ Enkelt att använda
- ✓ Sluter tätt marginalt

Markerad marginal kant ger fyllningen en anatomisk form

Gingival sköld förebygger underskott i gingivala/axiala delen av kaviteten

Den kraftiga bågformen säkrar att matrisen omsluter tanden

Ringen i nickel-titanium har en utmärkt fjädring och "ihågg-kommelse", kan autoklaveras upp till 1000 gånger

Vingar med hål gör det enkelt att placera och avlägsna matrisen

Ringens glasfiberförstärkta ben är V-formade för att fixera kilen

Hål för pincetten gör att kilen är lätt att placera och avlägsna

MOD



Parodontitfall



Kusp saknas



BORTTAGBARA WEDGE GUARDS

- + Minskar risken för approximala skador på granntänderna
- + Gör det snabbare och enklare att preparera i kontaktområdet
- + Skyddet kan avlägsnas efter preparation, kilen lämnas kvar på plats



ANATOMISKT FORMADE KILAR

- + Kilen kan komprimeras och utvidgas – lätt att placera, säkrar en optimal kantanslutning
- + Den ihåliga undersidan gör det möjligt att applicera en extra kil från den motsatta sidan



MATRISER MED VINGAR OCH HÅL

- + 3,3 mm: För fyllningar i primära tänder och små fyllningar i premolarer
- + 4,5 mm: För mellanstora preparationer i premolarer
- + 5,5 mm: Den mest använda storleken för klass II-fyllningar i molarer
- + 6,5 mm: För djupa och stora kaviteter i molarer, där kusp saknas



PRAKTISK TÅNG

- + Låsmekanismen och de vinklade skänklarna håller fast ringen vid applicering
- + Inbyggda skårer för reaktivering av ringen



SPECIALPINCETT

- + Pincetten är försedd med en spets som griper tag i hålen på matrisen/kilen och säkrar en god kontroll
- + Naturligt stängt läge: mindre risk för att tappa matrisen eller kilen
- + Inbyggd kulstoppare i pincettens spets



STARKA RINGAR AV NICKEL-TITANIUM

- + Universal ring för molarer
- + Smal ring för premolarer

