


3M ESPE

Var inte rädd för vatten!



Polyeter avtrycksmaterial

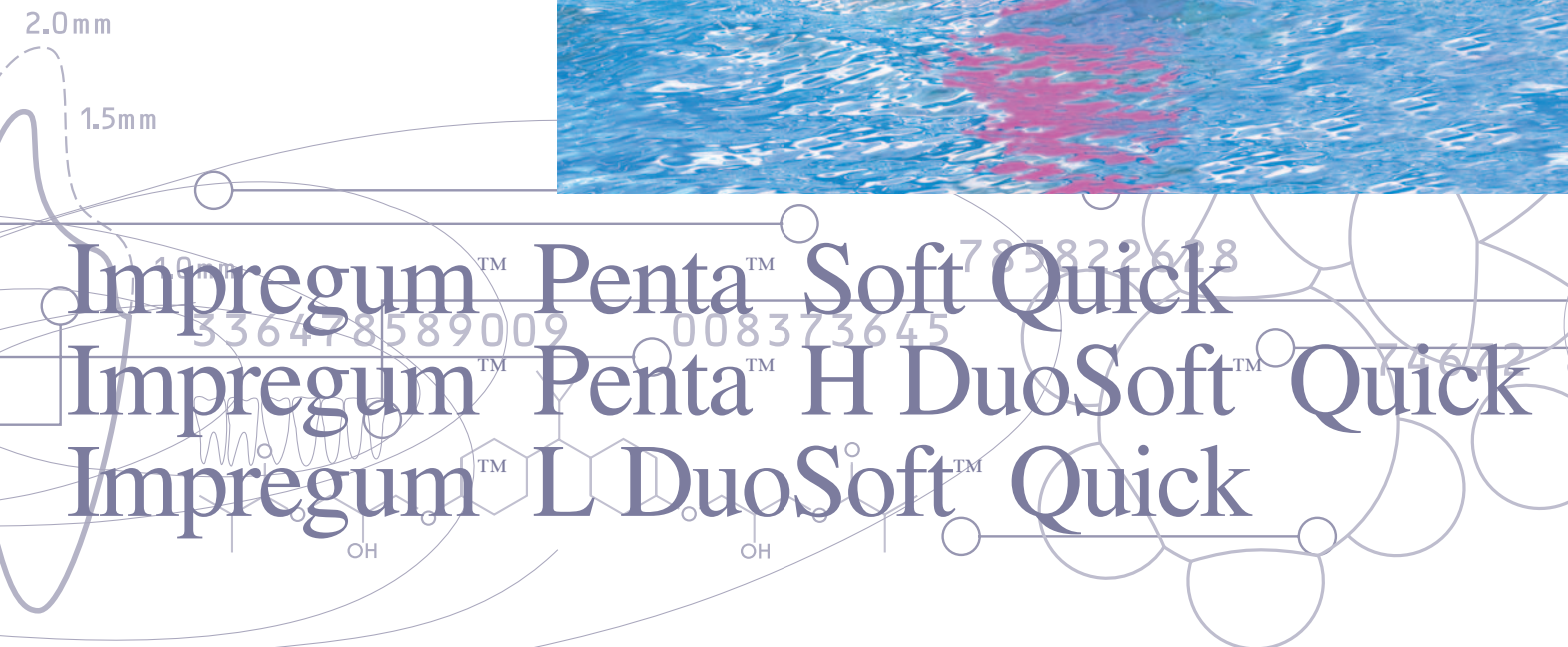

- Minskar arbets- och stelningstiden med minst 33% jämfört med 3M ESPE Impregum Penta Soft avtrycksmaterial
- Spar tid
- 1 minuts arbetstid
- 3 minuter stelningstid i munnen
- Finns med viskositeter för Heavy/Light body och Medium body
- Automatisk blandning med Pentamix™ 2 blandningsmaskin

Nu tar du exakta avtryck 33 % snabbare!*

Impregum™ Penta™ Soft Quick polyeter - det bästa för en- till tvåledsavtryck!

Impregum Penta Soft Quick är **idealiskt för en- till tvåledsavtryck**. Det innebär att du kan använda ETT avtrycksmaterial för de flesta av dina kron- och broarbeten! Den kortare arbetstiden och snabbare stelningen ger kortare tid i stolen för patienten. Polyetermaterialiet gör det dessutom lättare för dig att ta ett korrekt avtryck vid första försöket!

Indikationer:

- Avtryck för inlay/onlay, fasader och kron- och bropreparationer
- Avtryck för fixturer och implantat

Bäst lämpat för en- till tvåledsavtryck:

- Impregum™ Penta™ Soft Quick (Monofas)
- Impregum™ Penta™ H/L DuoSoft™ Quick (två viskositeter)


För fall med flera led – Normalstelnde version:

- Impregum™ Penta™ Soft (Enfas)
- Impregum™ Penta™ H / Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ (ensteg/två viskositeter)

Egenskaper och fördelar:

Egenskaper	Fördelar
Quick-versionernas egenskaper	
<ul style="list-style-type: none"> • Arbetstid 1 minut • Intraoral stelningstid 3 minuter 	<ul style="list-style-type: none"> • Spar tid • Kortare tid för patienten
Soft-materialens egenskaper	
<ul style="list-style-type: none"> • Mindre styv polyeter • Fräsch mintsmaak 	<ul style="list-style-type: none"> • Lättare att avlägsna för tandläkare och lab • Rätt styvhet för de flesta indikationerna • Behagligare för patienten
Allmänna egenskaper hos polyeter	
<ul style="list-style-type: none"> • Initialt hydrofil • Utmärkta flytegenskaper • Snap-set stelning 	<ul style="list-style-type: none"> • Ger precisa avtryck under fuktiga förhållanden • Utmärkt detaljåtergivning • Minskar behovet av kostsamma justeringar och omgörningar • Gör det lättare att få ett korrekt avtryck vid första försöket

Spar tid med Impregum™ Penta™ Soft Quick och Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick polyeter material:

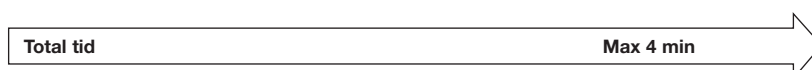

* Jämfört med 3M™ ESPE™ Impregum™ Penta™ Soft Polyeter avtrycksmaterial

Erbjuder samma beprövade tillförlitlighet som alla Impregum™ polyeter material från 3M ESPE

Fördelar med Soft-materialen:


- Hydrofil (mer än A-silikon)
- Behåller formen
- Lättare att avlägsna
- Utmärkta flytegenskaper
- God smak

- Överlägsna flytegenskaper – återger minsta detalj för precisa avtryck
- Initialt hydrofil – ger exakta avtryck i fuktiga förhållanden
- Snap-set stelningen hos Soft-materialen är extremt förlåtande

Förstklassig detaljåtergivning tack vare överlägsna flytegenskaper

Hajfentestet, är ett test som visar ett avtrycksmaterials flytegenskaper.*

Impregum™ Penta™ Soft/-Quick polyeter flyter lätt in i de svåraste ställena, utan att rinna – och ger därmed en förstklassig detaljåtergivning². Det ger de bästa flytegenskaperna under hela arbetstiden.

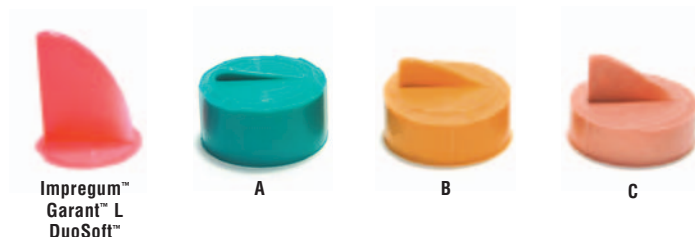


Resultaten vid slutet av den av tillverkaren rekommenderade arbetstiden.

*Källa: Richter B., Kuppermann B., Führer C., Klettke T.

Flytegenskaper hos Light body avtrycksmaterial under arbetstiden. CED/NOF/IADR 2004 #142

Snap-set stelningen minskar stressen för tandläkare och sköterskor

Impregum™ Penta™ Soft/-Quick polyeter är extremt förlåtande. Snap-set stelningen – som är typisk för polyetermaterial – garanterar att materialet inte börjar stelna före arbetstidens slut, men går därefter omedelbart över till stelningssfasen. Slutresultatet blir en restauration som passar exakt utan avvikelser.

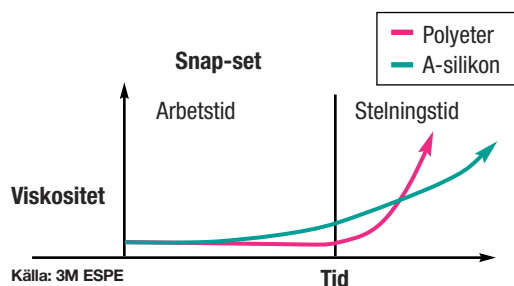

Våra Impregum™ Quick Avtrycksmaterial och vår Pentamix™ 2 Blandningsmaskin bildar ett pålitligt och robust system.

Beställningsinformation

Artikelnummer	Produktinformation
31770	Introduktionskit Impregum™ Penta™ Soft Quick 1 Baspasta á 300 ml, 1 katalysator á 60 ml 10 Penta röda blandningsskruvar, 1 Penta materialbehållare 1 Penta elastomerspruta, 1 polyeteradhesiv á 17 ml
31764	Impregum™ Penta™ Soft Quick Refill 2 Baspasta á 300 ml; 2 katalysator á 60 ml
31775	Impregum™ Penta™ Soft Quick 1 Penta materialbehållare
31777	Impregum™ Penta™ Soft Quick Upgrade Kit 1 Baspasta á 300 ml; 1 katalysator á 60 ml 10 Penta röda blandningsskruvar, 1 Penta materialbehållare
31780	Promotion Pack Impregum™ Penta™ Soft Quick/Pentamix™ 2 1 Pentamix 2, 1 Introduktionskit 31770, 3 refill 31764
31772	Introduktionskit Impregum™ Penta™ H/L DuoSoft™ Quick 1 Baspasta á 300 ml, 1 katalysator á 60 ml 10 röda Penta blandningsskruvar, 1 Penta materialbehållare 2 Garant patroner á 50 ml, 10 Garant vita blandningsskruvar 10 Garant vita applikationsspetsar, 1 polyeteradhesiv á 17 ml
31768	Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick Refill 2 Baspasta á 300 ml, 2 katalysator á 60 ml
31766	Impregum™ Garant L DuoSoft™ Quick Refill 4 Garant patroner á 50 ml, 20 Garant vita blandningsskruvar
31773	Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ Quick 1 Penta materialbehållare
31762	Promotion Pack Impregum™ Penta™ H/L DuoSoft™ Quick/Pentamix 2 1 Pentamix 2, 1 Introduktionskit 31772, 3 Refill 31768



Introduktionskit
Impregum™ Penta™ Soft Quick



Introduktionskit
Impregum™ Penta™ H/L
DuoSoft™ Quick

3M

3M Svenska AB
3M ESPE Dentalprodukter

Bollstanäsvägen 3
191 89 Sollentuna
Tel 08-92 21 00
Fax 08-92 22 89
www.3mespe.com/se

Tryckt i Danmark
© 3M 2005

3M, ESPE, Impregum, Garant,
Penta och Pentamix är varumärken
för 3M och 3M ESPE AG