

CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW

Utmärkt glansbeständighet,
nu med 3 grader av flytbarhet.



DEN ENDA KOMPOSIT DU KOMMER ATT BEHÖVA

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

Prisbelönt fem år i rad – den universala flytande kompositen finns nu i 3 olika grader av flytbarhet. Anpassade till dina behov och möjliggör hållbara och estetiska fyllningar på ett enkelt sätt.

- ✓ Utmärkt glansbeständighet
- ✓ Enkel att polera
- ✓ Hållbara fyllningar
- ✓ Många olika indikationer
- ✓ 3 flytbarhetsnivåer



3 FLYTBARHETSNIVÅER

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

High

Low

Super Low


FLYTFÖRMÅGA



HÖG FLYTFÖRMÅGA

- ✓ Utmärkt vätningsförmåga och adaptation
- ✓ Som liner
- ✓ För små kaviteter


1 min. efter applicering
(horisontellt och vertikalt)

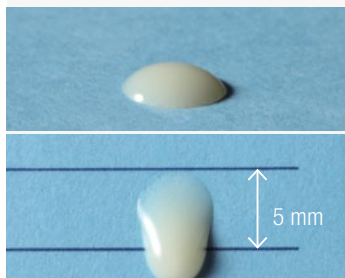

MEDELHÖG FLYTFÖRMÅGA

- ✓ För många olika typer av anteriora och posteriora fyllningar


1 min. efter applicering
(horisontellt och vertikalt)

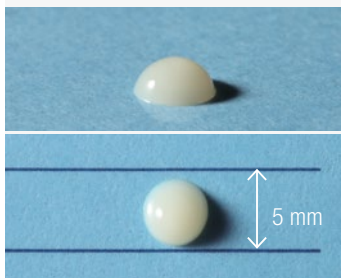

LÅG FLYTFÖRMÅGA

- ✓ Idealisk för uppbyggnad av posteriora kuspar och åsar
- ✓ Bibehåller den givna formen

1 min. efter applicering
(horisontellt och vertikalt)

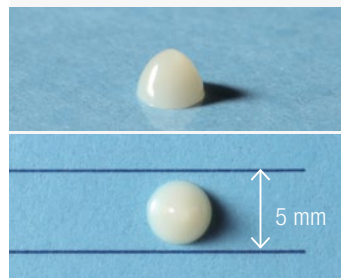

ENASTÅENDE LÄTT ATT POLERA

ENASTÅENDE LÄTT ATT POLERA MED NATURLIG OMEDELBAR GLANS SOM HÅLLER LÄNGE

En av de viktigaste egenskaperna som krävs av kompositfyllningar är varaktig glans. Fillerpartiklarna i CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow har utformats för att ge högglans och varaktigt bibehålla den glansen. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow kan poleras extremt enkelt och

sekunds snabbt. Bara genom att torka av ytan med en tork eller bomullsulle doppad i alkohol skapar högglans. Estetiken förhöjs ytterligare av särskilda ljusdiffusionskluster som levererar utmärkt färganpassning som tillgodogör sig omkringliggande tandstrukturen utan övergångar.

Glans efter avtorkning med etanol¹



CLEARFIL MAJESTY™
ES Flow




Filtek Supreme
Ultra Flowable*




Tetric EvoFlow*

GLANS (%)^{1,2}

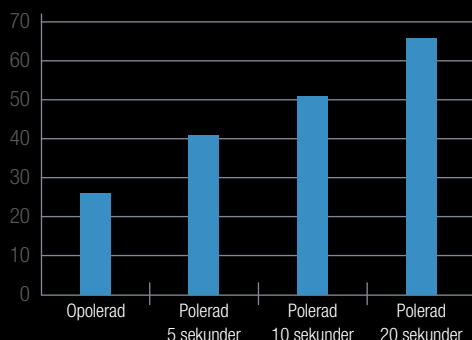

TANDBORST-SLITAGETEST^{1,2}

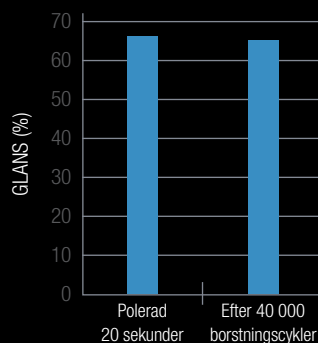



* Varumärke som inte tillhör Kuraray Noritake Dental Inc. ¹Datakälla: Kuraray Noritake Dental Inc. ²Testresultat med CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low



Källa: Dr Nicola Scotti. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow low

ÖVERLÄGSEN ENKEL HANTERING

Utvecklad för bästa hanteringsegenskaper. Vi behandlar fillerna med ett egenutvecklat silankopplingsmedel. Detta, och att vår komposit innehåller både submikrona och klusterfiller (0,18 μm till 3,5 μm) tillhandahåller enastående hanteringsegenskaper hos pastan som förenklar applicering, hantering och formning. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow är en klibbfri komposit och genom sprutans särskilda utformning kan materialet fördelas utan luftblåsor.

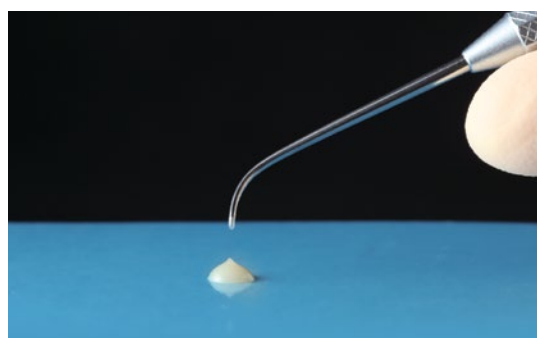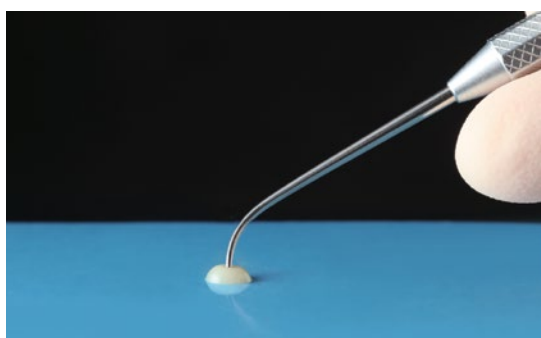


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low



Källa: Dr Nicola Scotti. CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow low

MÅNGA OLIKA INDIKATIONER

- ✓ Direkta fyllningar för alla kavitetklasser, cervikala lesioner (t.ex. rotytekaries, V-formade defekter), tandslitage och tanderosion
- ✓ Som isolering/liner i kaviteter
- ✓ För korrigerande av tandens position och form
- ✓ Intraoral reparation av frakturerade fyllningar
- ✓ Cementering av keramiska och komposit inlays, onlays, och skalfasader som är tunnare än 2 mm

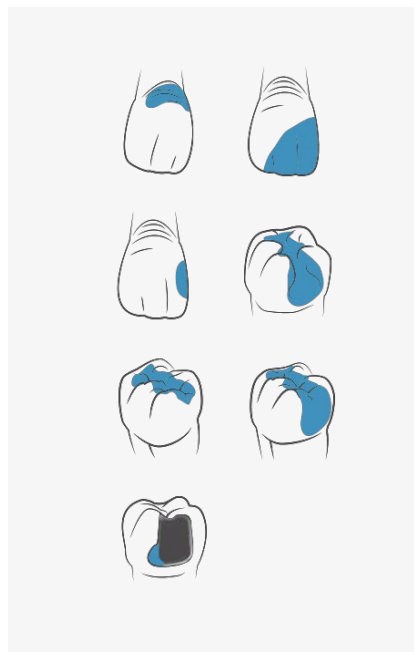

UTMÄRKTA MEKANISKA EGENSKAPER

Kuraray Noritake Dental:s egenutvecklade silankopplingsmedel medger hög fillerkoncentration (upp till 78 viktprocent eller 64 volymprocent) för att tillhandahålla överlägsna mekaniska egenskaper som även är lämpliga för posteriora fyllningar.


	BÖJHÅLLFASTHET	TRYCKHÅLLFASTHET
Super Low	152 MPa	374 MPa
Low	151 MPa	373 MPa
High	145 MPa	358 MPa

Uppfyller SS-EN ISO 4049:2009. Källa: Kuraray Noritake Dental Inc.



Fallet utfört med materialtypen med låg flytbarhet (Low). Bilder: Dr Keiichi Hosaka.

JÄMFÖRELSE AV BÖJHÅLLFASTHET

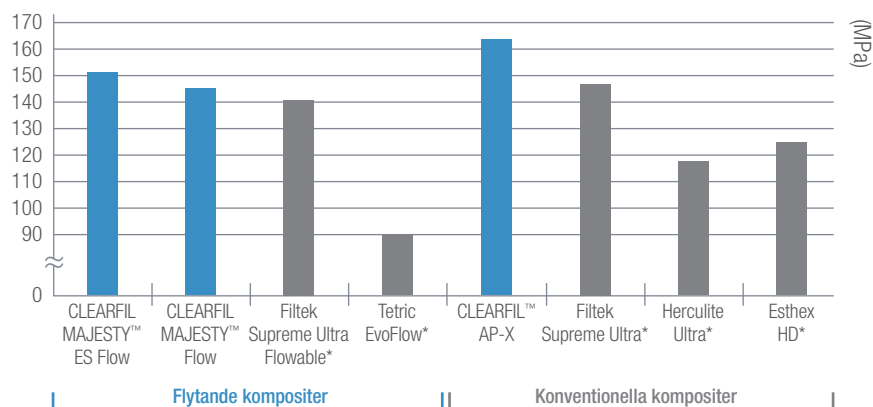

* Varumärke som inte tillhör Kuraray Noritake Dental Inc.

Testresultat med CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low. Uppfyller SS-EN ISO 4049:2009. Källa: Kuraray Noritake, Dental Inc.

LJUSDIFFUSIONSTEKNIK

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow återskapar tandstrukturens diffusionsegenskaper naturtroget. Den visar en högre grad av ljusdiffusion i de mer opaka nyanserna (dentin) och en lägre grad i de mer translucenta. I praktiken blir slutresultatet naturligt: den här ljusdiffusionen är det ultimata "verktyget" för att skapa en fyllning som utan ansträngning smälter in bland omgivande tänder.

Ljusdiffusion är ett materials förmåga att sprida och reflektera ljusstrålar åt många olika håll. Kuraray Noritake Dental: ljusdiffusionsteknik i kompositmaterial använder ljusspridande fillerpartiklar för att förbättra materialets estetiska egenskaper. Det ger en förmåga att sprida ljuset åt alla håll på ett sätt som efterliknar de naturliga tänderna, och leder till en högestetisk fyllning.


LJUSDIFFUSIONSTEST

Följande test visar skillnaden i ljusdiffusion.


Direkt på svart/vit bakgrund



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow
(högsta grad av ljusdiffusion)

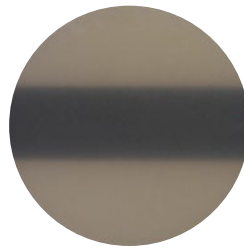

3M ESPE Filtek
Supreme Ultra Flowable*

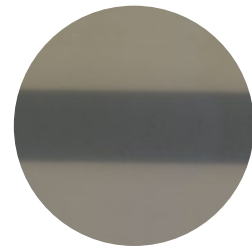

Ivoclar Vivadent
Tetric EvoFlow*

Ett litet avstånd över svart/vit bakgrund



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow
(högsta grad av ljusdiffusion)



3M ESPE Filtek
Supreme Ultra Flowable*




Ivoclar Vivadent
Tetric EvoFlow*




TILLGÄNGLIGA NYANSER

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

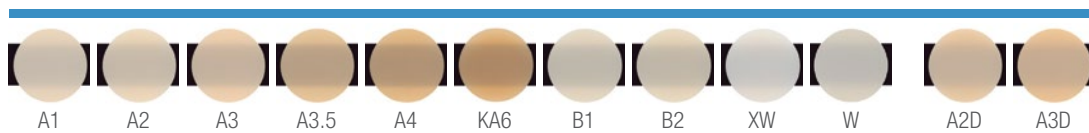

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

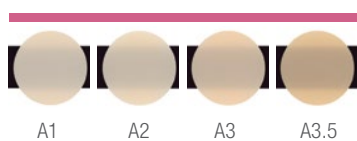

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High



ENKLA KLINISKA STEG



Preparera kaviteten.



Applicera bonding enligt tillverkarens anvisningar.



Applicera och forma CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow.*



Polera fyllningen.

*Fallet utfört med materialtypen med låg flytbarhet (Low). Bilder: Dr Horifumi Tashiro.

PRODUKTSORTIMENT

CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low

- #3341-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A1)
 - #3342-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A2)
 - #3343-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A3)
 - #3344-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Super Low (A3.5)
- 1 spruta (2,7 g/1,5 ml), 15 blandningsspets



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low

- #3301-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A1)
 - #3302-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A2)
 - #3303-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3)
 - #3304-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3.5)
 - #3305-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A4)
 - #3306-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (KA6)
 - #3307-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (B1)
 - #3308-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (B2)
 - #3309-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (XW)
 - #3310-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A2D)
 - #3311-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (A3D)
 - #3312-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low (W)
- 1 spruta (2,7 g/1,5 ml), 15 blandningsspets



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High

- #3321-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A1)
 - #3322-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A2)
 - #3323-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A3)
 - #3324-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A2D)
 - #3325-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow High (A3D)
- 1 spruta (2,7 g/1,5 ml), 15 blandningsspets



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Blandningsspets

- #3331-EU CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Blandningsspets (N)
- 20 blandningsspets





KONTAKTUPPGIFTER

Kuraray Europe Benelux, Nordics & Baltics

Margadantstraat 20
1976 DN IJmuiden
Nederländerna

Telefon +46 (0) 844 685 329
E-post infonordics@kuraray.com

Webbplats www.kuraraynoritake.eu/se

- Läs bruksanvisningen som medföljer produkten innan du använder den.
- Produktens specifikationer och utseende kan ändras utan förvarning.
- Färgen i tryck kan avvika något från verkligheten.

"CLEARFIL" och "CLEARFIL MAJESTY" är varumärken som tillhör KURARAY CO., LTD



Kuraray Noritake Dental Inc.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Website www.kuraraynoritake.com

