




	Blandningsmaskiner	Avtryckstekniker	Singelkronor	Små implantat (≤ 2 led)	Inlägg/onlay (≤ 2 led)	Små broar (≤ 3 led)	Rekommenderad max arbetstid (min:sek)	Intraoral stelningstid vid 37 grader C (min:sek)
 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick (Medium Body)		Monofas 1-steg	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00
3M™ Impregum™ Super Quick (Light Body)		1-steg	✓	✓	✓	✓	0:45	2:00

Beställningsinformation



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body introduktionsförpackning (69383)



3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body introduktionsförpackning (69381)

Artikelnummer Produktinformation

NEW

69383 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body
1 bas pasta MB – 300 ml, 1 katalysator MB – 60 ml, 13M™ Penta™ materialbehållare MB, 10 3M™ Penta™ blandningskruvar – Röd, 1 3M™ Penta™ Elastomerspruta, 1 Polyeter skedadhesiv – 17 ml, 3 3M™ Astringent Retraction Paste kapslar

NEW

69381 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body/Light Body
1 bas pasta MB – 300 ml, 1 katalysator MB – 60 ml, 2 patroner LB – 50 ml /unit, 13M™ Penta™ materialbehållare MB, 10 3M™ Penta™ blandningskruvar – Röd, 5 3M™ Intraoral sprutor lila, 5 3M™ Garant™ blandningskruvar lila, 5 3M™ Garant™ Intraoral spetsar vit, 1 Polyeter skedadhesiv – 17 ml, 3 3M™ Astringent Retraction Paste kapslar, 6 3M™ Impression Trays

Refills

NEW

69385 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body Refill
2 bas pasta - 300 ml /st, 2 katalysatorer - 60 ml /st

NEW

69379 3M™ Impregum™ Super Quick Light Body
4 patroner – 50 ml /st, 5 3M™ Intraoral sprutor, lila, 5 3M™ Garant™ blandningskruvar lila

Blandningsmaskiner & Tillbehör

77871 3M™ Pentamix™ 3 automatisk blandningsmaskin

77903 3M™ Pentamix™ Lite automatisk blandningsmaskin – 230 V 50 Hz INT
incl. 1 3M™ Penta™ materialbehållare

77906 3M™ Pentamix™ Lite automatisk blandningsmaskin – 230 V 50 Hz CH
incl. 1 3M™ Penta™ materialbehållare

NEW

69387 3M™ Impregum™ Penta™ Super Quick Medium Body materialbehållare

77944 13M™ Penta™ Cartridge 3M™ Pentamix™ automatisk blandningsmaskin

71507 3M™ Intraoral spruta lila, 20 st

71508 3M™ Intraoral spruta lila, 50 st

77580 1 Garant dispenser 1:1/2:1

77601 Väggfäste- kit 3M™ Pentamix™ 3 blandningsmaskin

30600 1 Polyeter skedadhesiv – 17 ml

77949 3M™ Penta™ blandningskruvar – Röd, 50 st

NEW

71454 3M™ Garant™ blandningskruvar lila, 50 st

71461N 3M™ Garant™ Intraoral spetsar vita, 50 st



3M Health Care Division
3M Svenska AB,
Bollstanäsvägen 3 | 191
89 Sollentuna Sweden
Office: +468922100

3M.com/Dental

3M, Garant, Impregum, Penta och Pentamix är varumärken från 3M Company eller 3M Deutschland GmbH. Används under licens i Canada. Alla andra varumärken ägs av andra företag.
© 3M 2018. All rights reserved.

3M™ Impregum™ Super Quick Polyether Impression Material

Går det att få
med alla detaljer
på 2 minuter?
Ja, det gör det.



Snabbaste vägen till exakt polyeter precision för små indikationer.

3M™ Impregum™ Super Quick.

Impregum polyetrar har alltid varit känt för att ge optimala avtryck vid implantat och andra komplexa situationer. Visst skulle det vara bra att kunna få samma exakta avtryck även till singelkronor? Vi har nu gjort det till verklighet genom att utveckla vårt nya Impregum Super Quick polyetermaterial.



Snabbare stelningstid

Så snabbt, så bra: Med bara 2 minuters stelningstid får du ett snabbare avtryck med nya Impregum Super Quick till mindre konstruktioner såsom singelkronor, små 3-leds broar, implantat samt inlägg/onlays.

100% Polyeter - exakt precision

Liksom alla polyetrar så har Impregum Super Quick materialen visat en utmärkt prestanda även i fuktig miljö och med goda flytegenskaper. Detta leder till en hög nivå av tillförlitlighet och detaljåtergivning för precisionsavtryck.

Det är speciellt viktigt att du vet hela arbetstiden för ditt avtrycksmaterial. Eftersom det är en polyeter, så har du 45 sekunders arbetstid med Impregum Super Quick. Använd den tid du behöver. Du kan använda den avsatta arbetstiden fullt ut - ingen stelning innan arbetstidens slut. Så fort som arbetstiden är över, startar stelningsfasen. Till skillnad mot vissa VPS material. Detta garanterar till en bättre detaljåtergivning och färre förvrängningar.

Låt dina patienter känna sig komfortabla.

Den fräscha mintsmaken tillsammans med den korta tid som krävs för avtrycket att stelna, förbättrar patientens komfort avsevärt.

Polyetern passar in i CAD/CAM flödet.


Impregum Super Quick går att scanna, med det vanligaste förekommande scanners på marknaden, vilket ger ett effektivt samarbete med ditt tandtekniska lab.



Snabb och måttlig fuktkontroll och retraktion av gingival mjukvävnad med 3M™ Astringent Retraction paste



Enkel och exakt applicering av 3M™ Impregum Super Quick lightbody polyetermaterial med 3M™ Intraoral spruta (lila)

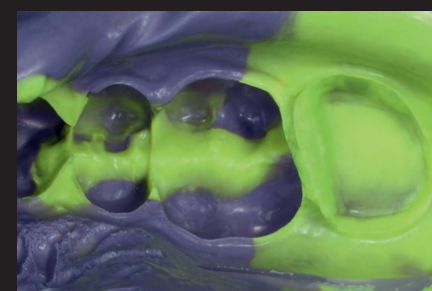

Luftblåsfritt avtryck med kontrasterande färg för exakt detaljåtergivning

Enstegs avtryck med 3M™ Impregum Super Quick polyetermaterial (Medium och lightbody) i en engångssked 3M™ Impression tray.

HØY
TILLFREDSTÄLLELSE

En klinisk utvärdering visar en mycket hög tillfredställelse vad gäller precision med 3M™ Super Quick avtrycksmaterial och exakt passform av krona eller bro. **95%**



Källa: 3M field evaluation with 447 participants from Europe and the US, 2017

3M™ Impregum™ Super Quick

- Första supersnabba polyetern med 45 sek. arbetstid och snabb stelningstid, 2 minuter
- Tillgänglig i medium och lightbody konsistens
- För monofas och enstegs avtrycks teknik
- Perfekt för avtryck av singelkronor, små 3-ledsbroar, implantat och inlägg/onlays

